Maxime Manet : 06 38 23 93 55 Technico-commercial maxime.manet@apexmedicalcorp.com Marc Kerharou: 06 17 01 07 55 Contacter Thierry DARRAS: 07 85 72 35 06 Directeur des Ventes marc.kerharou@apexmedicalcorp.com thierry.darras@apexmedicalcorp.com Julien d'Agaro : 06 15 68 08 93 Julien Coutarel: 07.58.08.67.57 Technico-commercial Technico-commercial julien.dagaro@apexmedicalcorp.com julien.coutarel@apexmedicalcorp.com

FRANCE

Apex Medical France SAS 4 Blvd. de La Chanterie, 49124 Saint Barthélémy d'Anjou, Pays De La Loire, France T +33 272 792 713 / F +33 285 730 767 adv.france@apexmedicalcorp.com

SIEGE SOCIAL

Apex Medical Corp.

No. 9, Min Sheng St., Tu-Cheng, New Taipei
City, 23679, Taiwan T +886 2 2268 3100
F +886 2 2268 6525 marketing@apexmedicalcorp.com



All rights reserved Specifications may change without notice. www.apexmedicalcorp.com



Domus 4/Auto

Matelas à Redistribution alternée des Pressions

- Convient aux patients présentant un risque moyen à élevé d'escarres.
- Décharge talonnière pour une protection optimale des talons
- CPR Rotative, pour un dégonflage rapide












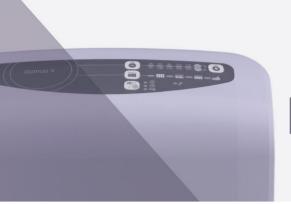


Domus 4/Auto



REF - 9C077072

Variation des pressions durant l'alternance Le Domus 4 / Auto est conçu pour :

- Maximiser la sécurité du patient,
- Offrir plusieurs modes thérapeutiques capables de répondre aux besoins cliniques du patient

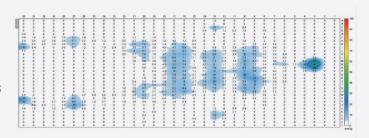

Réglage digital du poids jusqu'à 200 kg (Semi-Automatique)



Verrouillage du panneau : Le panneau se verrouille automatiquement au bout de 5 minutes. Appuyer pendant 3 secondes pour le déverrouiller. Alarmes visuelle et sonore en cas :

- De basse pression,
- De problèmes liés à l'alimentation électrique,
- De dysfonctionnement du compresseur.



Mode Dynamique : Alternance 1-sur-2, temps du cycle 10 min.



Mode Statique Basse Pression Continue : Réduit la pression avec 1/3 de moins que le niveau de pression en mode alterné



Fonction Assise : Dynamique et Statique : La pression est légèrement augmentée lors du relève buste à 30°



Fonction Surgonflage: Mode soin obligatoire pour le transfert du patient. (retour en mode dynamique après 20min.)

Caractéristiques Techniques

Modèle		Domus 4 / Auto
Compresseur	Dimensions	29 x 18,5 x 12,6 cm
	Poids	2,2 kg
	Matériau boîtier	ABS Ignifugé
	Alimentation	220-240V / 50 Hz
	Temps de cycle	10 min.
Matelas	Dimensions	200 x 85 x 20,3 cm
	Hauteur cellule	20 Cellules de 20,3 cm
	Poids	6,9 Kg
	Matériau Housse	Elastique stretch intégrale
	Matériau Cellule	TPU
	Poids maxi patient	200 kg
	Normes Feu	EN 597-1 & EN 597-2



Cellules amovibles